



Flaem HospiNeb

Gebruiks- en onderhoudsinstructies

Westfalen
Medical

Inbegrepen:

- › Flaem HospiNeb
- › Vernevelaar inclusief mondstuk en masker (volwassenen en kind).
- › Reistasje



Gemak

De Flaem HospiNeb compressor beschikt alleen over een aan/uit-knop. Hierdoor is het door iedereen eenvoudig te bedienen. Daarnaast is de compressor door middel van het handvat gemakkelijk te dragen.

Doorzichtige vernevelaar


Doordat de vernevelaar doorzichtig is, kunt u tijdens het vernevelen gemakkelijk zien hoeveel medicatie er nog in de vernevelaar zit.

SoftTouch-maskers

Deze maskers hebben een buitenrand van zacht materiaal dat zorgt voor een perfecte aansluiting op het gezicht.

RF7 Dual Speed Plus Systeem

De meegeleverde vernevelaar is uitgerust met een snelheidsregelaar. Hiermee kiest u zelf eenvoudig tussen een snelle behandeling (maximale flow) of een rustigere, effectievere therapie (minimale flow).

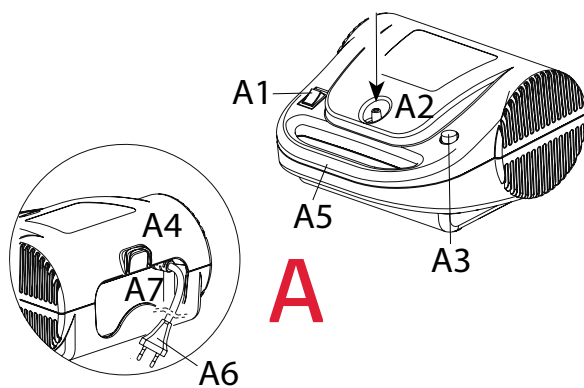


A Compressor

- › A1 Schakelaar
- › A2 Luchttuitlaat
- › A3 Luchtfilter
- › A4 Vernevelaarhouder
- › A5 Handgreep
- › A6 Stroomkabel
- › A7 Kabelruimte

B Vernevelaar en accessoires

- › B1 Verbindingsslang vernevelaar en compressor
- › B2 Vernevelaar
 - B2.1 Onderkant
 - B2.2 Diffuser
 - B2.3 Bovenkant
 - B2.4 Snelheidsschakelaar ventiel
- › B3 Mondstuk met klep
 - B3.1 Uitademingsklep
 - B3.2 Neusstuk
- › B4 SoftTouch masker voor volwassenen
- › B5 SoftTouch masker voor kinderen

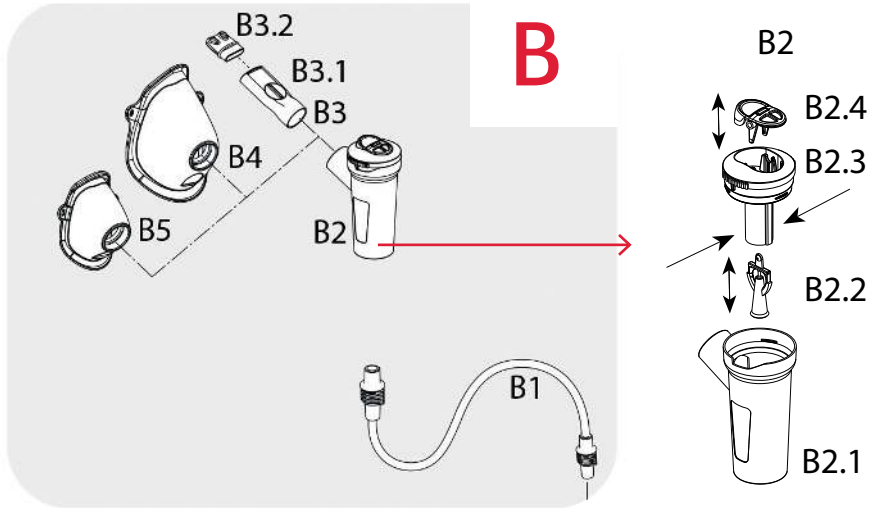

C Reistasje



Tips voor gebruik en onderhoud

- › Lees de instructiekaart die u van ons heeft ontvangen goed door.
- › Plaats tijdens gebruik de vernevelcompressor op een stabiele ondergrond.
- › Zorg voor een goede ventilatie.



Het is belangrijk om de vernevelaar goed te reinigen zoals beschreven. Niet alleen voor de levensduur van de vernevelaar, maar ook voor uw gezondheid.



Tip

Wij adviseren u de Flaem hygiënebox aan te schaffen. Hiermee reinigt en desinfecteert u alle onderdelen eenvoudig en hygiënisch. De box kan daarnaast gebruikt worden voor het stofvrij bewaren van alle onderdelen.



Dagelijks

- › Reinig na elk gebruik de vernevelaar zoals is aangegeven op de instructiekaart.
 - Ontkoppel de vernevelaar van de vernevelslang.
 - Haal alle onderdelen uit elkaar en spoel deze goed af onder handwarm water.
 - Dompel alle onderdelen 5 minuten onder in handwarm water met 3 druppels mild afwasmiddel.
 - Borstel forse vervuiling eraf met een zachte tandenborstel.
 - Spoel alles af onder warm kraanwater.
 - Schud het overtollige water eraf en laat de onderdelen drogen aan de lucht op een schone en pluisvrije theedoek.



Wekelijks

- › Neem wekelijks, of bij zichtbaar vuil, de compressor af met een licht vochtige doek.
 - Kook wekelijks de vernevelaar uit.
 - Volg eerst de stappen uit de dagelijkse reiniging.
 - Breng een pan met ruim kraanwater aan de kook.
 - Doe de onderdelen in de pan als het water kookt.
 - De onderdelen mogen de bodem van de pan niet raken, dit in verband met smeltgevaar.
 - Het water met de onderdelen 5 minuten laten doorkoken.
 - Laat de onderdelen drogen op een schone, pluisvrije theedoek.
- › Er mag ook gebruikt gemaakt worden van een magnetronsterilisator voor babyflessen.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat werkt niet.	Het netsnoer zit niet goed in het stopcontact.	Steek het netsnoer correct in de stopcontacten. Doet hij het nog niet, probeer dan een ander stopcontact.
Het apparaat vernevelt niet of slecht.	Er is geen medicatie in de vernevelaar gedaan.	Giet de juiste hoeveelheid medicatie in de vernevelaar. Houd de vernevelaar altijd rechtop.
	De vernevelaar is niet juist gemonteerd.	Haal de vernevelaar uit elkaar en zet het vervolgens op de juiste manier in elkaar.
	De vernevelaar is niet goed aangesloten op het apparaat.	Controleer of de vernevelaar op de juiste manier in elkaar is gezet. Controleer ook de aansluiting tussen de luchtuitlaat en het apparaat.
	De vernevelaar is gestopt.	Maak de vernevelaar schoon zoals aangegeven op de instructiekaart.
	De slang is gebogen, beschadigd of geknikt.	Controleer de slang op scheuren en knikken. Vervang de slang indien nodig, en neem contact op met de customer service voor een nieuwe reserveslang.
	Het luchtfilter is vuil.	Vervang het filter.
Het apparaat is luider dan normaal.	Filter is niet geplaatst.	Plaats het filter in het apparaat.

Stroomtoevoer	230 V - 50 Hz
Geluidsniveau	< 57 dB
Maximale druk	3,5 ± 0,5 bar
Afmetingen L x B x H	20 x 18 x 11 cm
Gewicht	1,8 kg
Minimale capaciteit geneesmiddel	2 ml
Maximale capaciteit geneesmiddel	8 ml





Heeft u nog vragen?

Wij bieden u diverse mogelijkheden om antwoord te krijgen op uw vraag. Zo hebben we op onze website antwoord gegeven op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat u zocht? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan graag voor u klaar!

Contactgegevens

Tel. 0570 - 234 626
vernevelaarinfo@westfalen.com
westfalenmedical.com

Bestellen van producten

Stuur een e-mail met uw bestelling naar bestellen@westfalen.com.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
08.00 uur tot 18.00 uur

Bereikbaarheid

buiten openingstijden

Tel. 0570 – 234 626
(uitsluitend voor spoedgevallen)



Westfalen Medical BV

Rigastraat 14
7418 EW Deventer

Tel. 0570 - 234 626
vernevelaarinfo@westfalen.com
westfalenmedical.com

Westfalen
Medical