



Gebruiksaanwijzing Flaem HospiNeb




westfalenmedical.com/
kennisbank/



Voor een goede werking van uw vernevelapparaat is het belangrijk dat u deze op de juiste manier gebruikt. Houd u daarom aan de volgende instructies.

In elkaar zetten

- › Steek de stekker in het stopcontact.
- › Plaats het mondstuk (**B2.2**) in het bovenste deel (**B2.3**) door erop te drukken.
- › Steek de snelheidsregelaar met ventiel (**B2.4**) in het bovenste deel (**B2.3**).
- › Giet het medicijn in het onderste deel (**B2.1**).
- › Sluit de vernevelaar door het bovenste deel (**B2.3**) rechtsonder te draaien.
- › Sluit het masker of mondstuk aan op de voorkant van de vernevelaar.

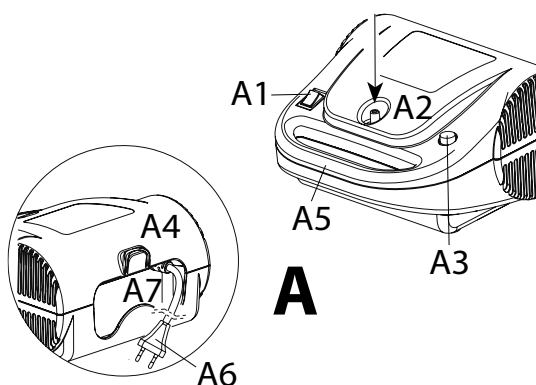

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| A1. Schakelaar | A5. Handgreep |
| A2. Luchtuitlaat | A6. Stroomkabel |
| A3. Luchtfilter | A7. Kabelruimte |
| A4. Vernevelaarhouder | |

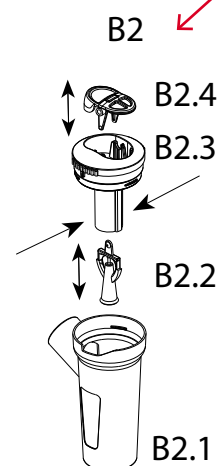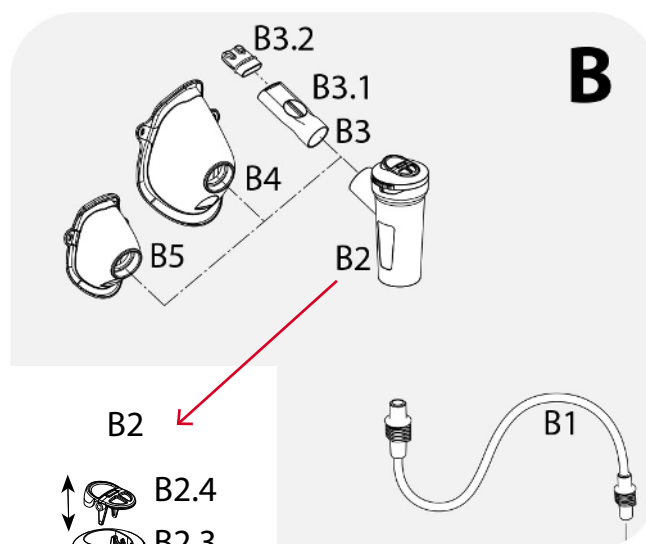

B1 Verbindingsslang vernevelaar en compressor

B2 Vernevelaar

B2.1 Onderkant

B2.2 Diffuser

B2.3 Bovenkant

B2.4 Snelheidsschakelaar ventiel

B3 Mondstuk met klep

B3.1 Uitademingsklep

B3.2 Neusstuk

B4 SoftTouch masker voor volwassenen

B5 SoftTouch masker voor kinderen

Vernevelen

- › Zorg ervoor dat u goed rechtop zit.
- › Plaats het mondstuk in uw mond of gebruik indien nodig het masker.
- › Zet het apparaat aan door op de schakelaar (**A1**) te drukken en adem diep in en uit.
 - Na het inademen kunt u uw adem 1 á 2 tellen even inhouden als dat lukt, zodat de ingeademde aerosoldruppels kunnen bezinken. Adem daarna langzaam uit.
- › Als u geen verneveldampen meer ziet bent u klaar. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.

Er mag een kleine hoeveelheid medicatie achterblijven.

Door het plaatsen van de snelheidsregelaar kiest u zelf eenvoudig tussen een snelle behandeling (maximale flow) of een rustigere, effectievere therapie (minimale flow). Plaats de snelheidsregelaar met ventiel (**B2.4**) door met een vinger op de zijde tegenover de Max-markering te drukken.

Verneveltijd

Circa 4 tot 8 minuten (afhankelijk van soort en hoeveelheid medicatie).

Algemeen

- › Plaats tijdens gebruik de vernevelcompressor op een stabiele ondergrond.
- › Zorg voor een goede ventilatie.



Schoonmaakinstructie Flaem HospiNeb

Voor een goede werking van uw vernevelapparaat is het belangrijk dat u deze goed schoonhoudt.
Houd u daarom aan de volgende instructies.

Compressor en vernevelslang

- › 1x per week, of bij zichtbaar vuil, afnemen met een lichtvochtige doek.
- › Haal na elke vernevelbeurt de vernevelaar van de slang en zet de compressor aan. Hierdoor wordt het vocht uit de slang geblazen.

Schoonmaakinstructies vernevelaar (na iedere vernevelbeurt)

- › Ontkoppel de vernevelaar van de vernevelslang.
- › Haal alle onderdelen uit elkaar en spoel deze goed af onder handwarm water.
- › Dompel alle onderdelen 5 minuten onder in handwarm water met 3 druppels mild afwasmiddel.
- › Borstel forse vervuiling eraf met een zachte tandenborstel.
- › Spoel alles af onder warm kraanwater.
- › Schud het overtollige water eraf en laat de onderdelen drogen aan de lucht op een schone, pluisvrije theedoek.

Jaarlijks onderhoud

Westfalen Medical komt 1x per jaar langs om de compressor te meten en het filter te vervangen.

Wekelijks: haal alle onderdelen uit elkaar.

Volg eerst de stappen die geadviseerd worden bij "na iedere vernevelbeurt".

- › Breng een pan met ruim kraanwater aan de kook.
- › Doe de onderdelen in de pan als het water kookt.
- › De onderdelen mogen de bodem van de pan niet raken, dit in verband met smeltgevaar.
- › Het water met de onderdelen 5 minuten laten doorkoken.
- › Laat de onderdelen drogen op een schone, pluisvrije theedoek.

Er mag ook gebruik gemaakt worden van een magnetronsterilisator voor babyflessen.



Tip: Wij adviseren u de Flaem hygiënebox aan te schaffen.

Hiermee reinigt en desinfecteert u alle onderdelen eenvoudig en hygiënisch.

De box kan daarnaast gebruikt worden voor het stofvrij bewaren van alle onderdelen.

