



Gebruiksaanwijzing COMFY®



westfalenmedical.com/
kennisbank/

Voor een goede werking is het belangrijk dat u de COMFY® op de juiste manier gebruikt. Leest u daarom zorgvuldig deze instructies door en houd u hier strikt aan.

Voor het eerste gebruik

Controleer of de digitale manometer **(A)** bij kamertemperatuur ten minste 190 bar aangeeft. Indien deze waarde niet wordt bereikt vóór het eerste gebruik, is de vulgraad te laag. In dat geval kunt u contact opnemen met Westfalen Medical op 0570-858404 of verkoop@westfalenmedical.nl.

Voor elk gebruik

Zorg ervoor dat de on/off draaiknop **(D)** van de cilinder op "off" staat.

- › **Toevoer via aansluitnippel (C):** Schuif de slang over de aansluitnippel en controleer of hij goed vastzit.
- › **Toevoer via snelkoppeling (E):** Zorg ervoor dat de verbinding, bijvoorbeeld van een beademingsapparaat, een DIN-koppeling is. Verbind de snelkoppeling en controleer of deze vastzit.



Open de on/off draaiknop **(D)** langzaam en volledig door hem tegen de wijzers van de klok in te draaien.

Bij toevoer via de aansluitnippel **(C)**, de gewenste flow rate op de flowregelaar **(B)** instellen.

Na circa 3 seconden worden zowel de druk in bar als de resterende tijd in uren en minuten weergegeven. De balkjes onderaan geven het huidige vulniveau aan.

Na elk gebruik:

- › Sluit de on/off draaiknop **(D)** door deze met de wijzers van de klok mee te draaien naar "off".
- › Draai vervolgens de flowregelaar **(B)** naar stand 5. Op die manier wordt de restdruk uit de cilinderkop geblazen. U hoort dit ook duidelijk.
- › Draai de flowregelaar **(B)** terug naar de nulstand.
- › Maak vervolgens de verbindingen van de aansluitnippel **(C)** of de snelkoppeling **(E)** los.

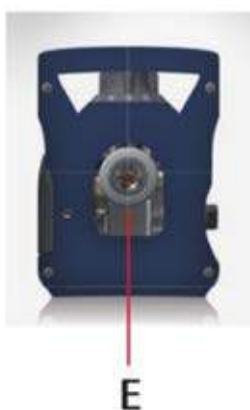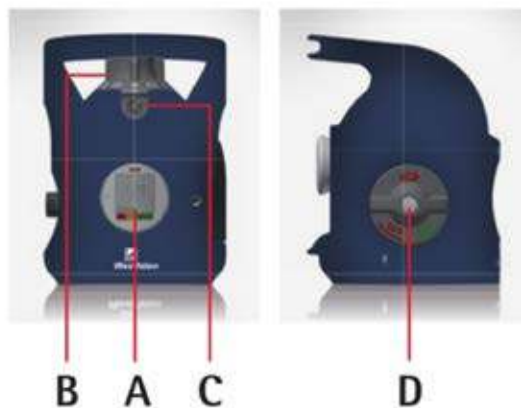

- A Digitale manometer
- B Flowregelaar
- C Aansluitnippel
- D On/off draaiknop
- E Snelkoppeling



Kan worden gebruikt op MRI-systemen tot 3 Tesla. Houd de afsluiter op ten minste 40 cm afstand van de magneetopening.*

* Deze condities werden getest met een Siemens Magnetom Trio (3Tesla) en Siemens Magnetom Avanto Fit (1,5 Tesla).