



Instructiekaart Aansluiten zuurstof op CPAP met een standaard slang



zuurstofinfo.nl/
downloads

In dit voorbeeld wordt gebruik gemaakt van de Philips DreamStation 2. Wanneer u een ander apparaat heeft ziet het er anders uit, maar in alle gevallen moet de connector tussen het CPAP-apparaat en de slang bevestigd worden. Zie achterzijde van deze instructiekaart om te zien waar de aansluiting zich op uw apparaat bevindt.

Let op: Om te voorkomen dat er zuurstof in het CPAP-apparaat kan stromen waardoor storingen kunnen ontstaan, is het van belang om de juiste volgorde aan te houden bij het in-en uitschakelen van het CPAP-apparaat en de zuurstof.

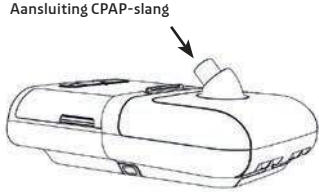

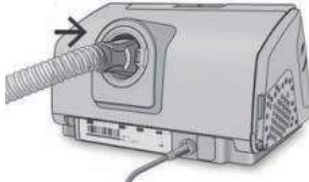
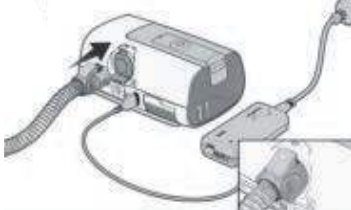
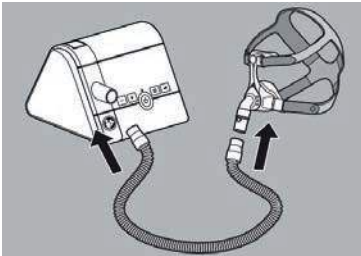
Inschakelen: schakel eerst het CPAP-apparaat in, start daarna de zuurstof.

Uitschakelen: stop eerst de zuurstof, schakel daarna het CPAP-apparaat uit.

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | | |
| 1 Haal de slang van de uitlaatpoort van uw CPAP-apparaat.  | 2 Plaats de connector op de uitlaatpoort van uw CPAP-apparaat.  | 3 Plaats de slang op uw connector.  |
| 4 Verwijder het dopje van de zuurstofaansluiting.  | 5 Sluit de zuurstofslang aan op de zuurstofaansluiting.  | 6 Storingen en/of vragen: Zuurstof: Tel. 0570-858 450 Slaapapneu: Tel. 0570-234 625  Westfalen Medical |



Aansluitingen CPAP-apparaten

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Philips Dreamstation 1</p>  <p>Aansluiting CPAP-slang</p> | <p>Philips Dreamstation 2</p>  <p>Aansluiting CPAP-slang</p> |
| <p>ResMed AirSense 10</p>  <p>Aansluiting CPAP-slang</p> | <p>ResMed AirSense 11</p>  <p>Aansluiting CPAP-slang</p> |
| <p>Löwenstein Prisma Smart Max</p>  <p>Aansluiting CPAP-slang</p> | |