



Gebruiksaanwijzing PARI BOY Classic met LC Sprint



[westfalenmedical.com/
kennisbank/](http://westfalenmedical.com/kennisbank/)

Voor een goede werking van uw vernevelapparaat is het belangrijk dat u deze op de juiste manier gebruikt. Houd u daarom aan de volgende instructies.

In elkaar zetten

- › Plaats het mondstuk op de vernevelaar. Zorg dat het blauwe uitademventiel aan de bovenzijde zit.
- › Sluit de slang aan de onderkant van de vernevelaar aan. Plaats het andere uiteinde van de slang in de Pari Boy Classic.
- › Plaats de stekker in het stopcontact.

Vernevelen

- › Maak het klepje aan de bovenkant van de vernevelaar open en giet hier de medicatievloeistof in.
- › Zorg ervoor dat u goed rechtop zit.
- › Sluit uw lippen goed rond het mondstuk.
- › Plaats uw mond niet over het uitademingsventiel van het mondstuk (blauw).
- › Houd de vernevelaar rechtop.
- › Adem rustig en diep in en adem onstpannen uit.
- › De behandeling is klaar als er geen nevel meer uit de vernevelaar komt.

Er mag een kleine hoeveelheid medicatie achterblijven.

Merkt u dat het vernevelen langer duurt? Maak dan uw vernevelaar volledig schoon aan de hand van de schoonmaakinstructies.

Ademt u te snel? Dan komt het PARI LC SPRINT PIF control systeem in actie! Dit is een geïntegreerde trainingstoel die het aanleren van een effectieve inhaleer techniek ondersteunt. Bij een te snelle of harde inademing, wordt het klepje (a) naar beneden getrokken, waardoor de opening (b) gesloten wordt. Hierdoor wordt u gedwongen om anders te gaan ademen.

Verneveltijd

Circa 5 tot 8 minuten (afhankelijk van druppelgrootte).

Algemeen

Volg de schoonmaakinstructies nauwkeurig op (zie achterzijde).





Schoonmaakinstructie PARI BOY Classic met LC Sprint

Voor een goede werking van uw vernevelapparaat is het belangrijk dat u deze goed schoonhoudt. Houd u daarom aan de volgende instructies.

Compressor en vernevelslang

- › 1x per week afnemen met een lichtvochtige doek.
- › Haal na elke vernevelbeurt de vernevelaar van de slang en zet de compressor aan. Hierdoor wordt het vocht uit de slang geblazen.

Filter compressor

1x per 2 weken controleren op vervuiling.

Schoonmaakinstructies vernevelaar (na iedere vernevelbeurt)

- › Ontkoppel de vernevelaar van de vernevelslangen.
- › Haal alle onderdelen uit elkaar.
- › Spoel alle onderdelen goed af onder handwarm kraanwater.
- › Dompel alle onderdelen 5 minuten onder in handwarm kraanwater met 3 druppels mild afwasmiddel.
- › Borstel forse vervuiling eraf met een zachte (baby) tandenborstel.
- › Spoel alles af onder warm kraanwater.
- › Schud het overtollige water eraf.
- › Laat de onderdelen drogen aan de lucht op een schone pluïsvrije theedoek.

Wekelijks: haal alle onderdelen uit elkaar.

- › Volg eerst de bovenstaande stappen die geadviseerd worden bij "na iedere vernevelbeurt".
- › Breng een pan met ruim kraanwater aan de kook.
- › Doe de onderdelen in de pan als het water kookt.
- › De onderdelen mogen de bodem van de pan niet raken, dit in verband met smeltgevaar.
- › Het water met de onderdelen 5 minuten laten doorkoken.
- › Laat de onderdelen drogen op een schone, pluïsvrije theedoek.

Er mag ook gebruik gemaakt worden van een magnetronsterilisator voor babyflessen.

Jaarlijks onderhoud

Westfalen Medical komt 1x per jaar langs om de compressor te meten en het filter te vervangen.




01. Afspoelen onder handwarm kraanwater.



02. Wassen met drie druppels mild afwasmiddel.



03. Afspoelen onder handwarm kraanwater.

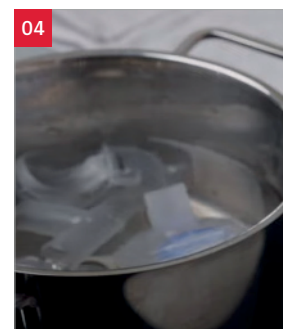

04. Uitkoken, 5 minuten of steriliseren in een sterilisator.