







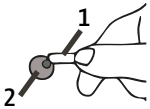

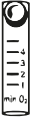








Instructiekaart Zuurstofconcentrator


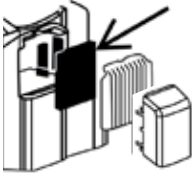







westfalenmedical.com/kennisbank/



<p>1 Lees altijd de instructies.</p> 	<p>2 Geen open vuur. Niet roken. Ook geen e-smoker/vape. En gebruik geen olie en/of vethoudende producten.</p> 	<p>3 Ventileer de ruimte goed. Kijk voor advies op de meegeleverde ventilatiewijzer.</p> 
<p>4 Gebruik i.v.m. brandveiligheid geen elektrische apparaten die vonken kunnen opwekken in de ruimte waar de concentrator staat en de client is.</p> 	<p>5 Plaats de concentrator op een veilige plek zoals de servicemedewerker heeft aangegeven. De concentrator moet altijd rechtop gebruikt worden.</p> 	<p>6 Plaats de concentrator niet onder de kapstok of tegen de gordijnen. Dit i.v.m. verzadiging zuurstof.</p> 
<p>7 Er mogen geen verlengkabels worden gebruikt.</p> 	<p>8 Technisch onderhoud mag alleen verricht worden door de servicemedewerker.</p> 	<p>9 Stop de stekker in het stopcontact en zet de concentrator aan d.m.v. de aan/uitknop.</p> <p>aan ● uit ○</p>
<p>10 Schuif de lange zuurstofslang (1) over de grijze tule (2). Controleer of de slang goed vast zit.</p> 	<p>11 Firesafe. Plaats de firesafe tussen de neusbril en de lange slang.</p> 	<p>12 Stel de flowmeter (aantal liters per minuut) in zoals voorgeschreven door uw arts.</p> 
<p>13 Ervaart u geen flow? Controleer de flow door de neusbril en/of slang te plaatsten in een glas water. Bij geen bubbels, slang nalopen en de flowmeter controleren. Bij nog geen flow contact opnemen met Westfalen Medical.</p>	<p>14 Na gebruik de concentrator uitzetten. Zet de concentrator uit als deze niet wordt gebruikt.</p> <p>aan ○ uit ●</p>	<p>15 Maximale lengte verbindingsslang.</p> 
<p>16 Wij adviseren u de neusbril 1x per week te vervangen.</p> 	<p>17 Het groffilter dient wekelijks te worden schoongemaakt. Bekijk de achterkant van deze kaart voor de schoonmaak-instructies.</p> 	<p>18 Storingen en/of vragen: Tel. 0570-858 450</p>  <p>Westfalen Medical</p>



Instructiekaart Filters

Perfect 02	<p>1 Filter bevindt zich aan de achterkant.</p> 	<p>2 Groffilter wekelijks stofzuigen.</p> 
Perfect 02	<p>1 Filters bevinden zich aan beide zijden.</p> 	<p>2 Groffilters wekelijks stofzuigen aan beide zijden.</p> 
Kröber 02 / 4.0	<p>1 Filter bevindt zich aan de achterkant.</p> 	<p>2 Groffilter wekelijks stofzuigen.</p> 
DeVilbiss 1025 / C525	<p>1 Filter bevindt zich aan de achterkant.</p> 	<p>2 Groffilter wekelijks stofzuigen.</p> 
Everflo	<p>1 Filter bevindt zich aan de achterkant.</p> 	<p>2 Aanzuiging wekelijks stofzuigen.</p> 