



ResMed AirSense 11

Gebruiks- en onderhoudsinstructies



Westfalen
Medical

Een korte kennismaking

AirSense 11

De AirSense 11 is een 3-in-1 PAP-apparaat dat wordt gebruikt voor de behandeling van slaapapneu. U ontvangt van ons bij het apparaat standaard een luchtbevochtiger en, indien gewenst, een verwarmde slang.

Makkelijke bediening

Doordat het apparaat is voorzien van een eenvoudige start-/stopknop, start u de therapie met één druk op de knop. Ook krijgt u in slechts enkele stappen toegang tot bijna alle functies. Daarnaast is het prettig dat het display automatisch dimt zodra de ruimte donker wordt.

Licht van gewicht

De AirSense weegt 1,13 kg en is een compact apparaat dat in de meegeleverde draagtas eenvoudig mee te nemen is.

Care check-in

Care check-in is een makkelijke manier om toegang te krijgen tot ondersteuning op maat. Daarnaast kunt u uw arts en leverancier laten weten hoe het met u gaat.

Wanneer u de instructies goed doorleest en het apparaat met zorg behandelt, heeft u veel plezier van de AirSense 11.





Lees meer over de Care Check-in op pagina 12.



Schematisch overzicht

1. Luchtbevochtiger
2. AirSense 11
3. AC Adapter (netsnoer)
4. (Verwarmde) slang

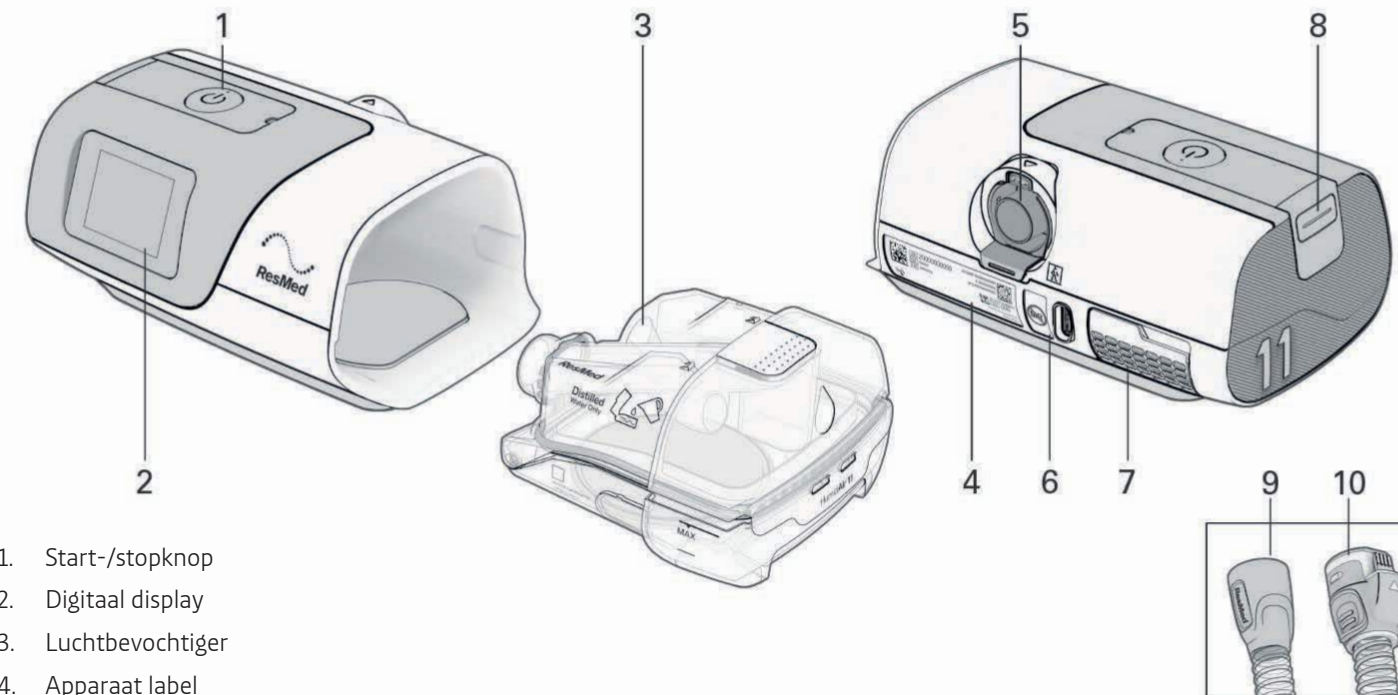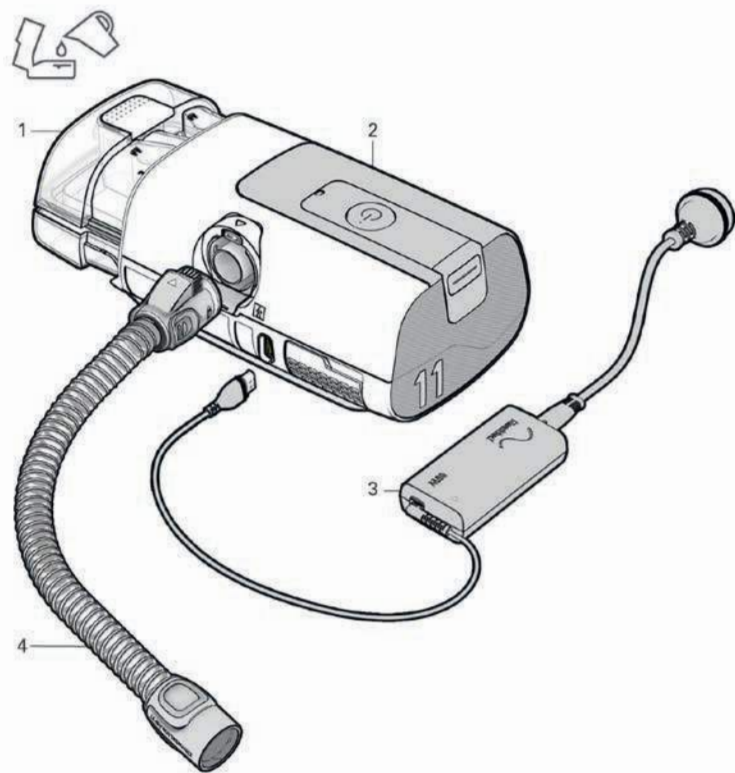

1. Start-/stopknop
2. Digitaal display
3. Luchtbevochtiger
4. Apparaat label
5. Uitlaatconnector
6. Aansluitpunt stroomvoorziening
7. Filtrerruimte
8. SD-kaart ingang
9. Aansluiting slang
10. Aansluiting verwarmde slang

Navigeren door het menu

Pictogrammen op digitaal display



Startscherm



Foutmelding luchtbevochtiger



Luchtbevochtiger warmt op



Luchtbevochtiger koelt af



Bluetooth is ingeschakeld



Signaalsterkte mobiel bereik



Geen internetverbinding



Vliegtuigmodus staat aan



Stille modus ingeschakeld, er worden geen gegevens verzonden

Het digitale display is voorzien van een touchscreen. Door te vegen en te tikken kunt u door het menu navigeren.

1 Vegen:

Veeg omhoog of omlaag over het scherm om de menuopties weer te geven.

2 Tikken:


Selecteer een instelling die u wilt wijzigen.



De start van de therapie

Voordat u gaat slapen

1. Zet uw masker op.
2. Druk op de knop “Therapie starten/Stand-by”.

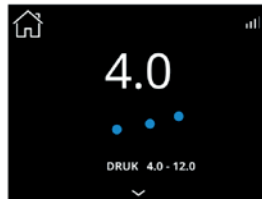

De therapie begint en het behandelingsscherm wordt weergegeven. Om uw slaapvoortgang te bekijken, veeg vanaf  omhoog om meer details te bekijken.

Opmerkingen:

Het apparaat heeft een lichtsensor die de helderheid van het scherm aanpast aan het omgevingslicht. Dit betekent dat het scherm automatisch dimt, en na een korte tijd zwart is. Tik op het scherm om het weer aan te zetten.

Als de stroom wordt onderbroken tijdens de therapie wordt de therapie automatisch opnieuw opgestart wanneer de stroom wordt hersteld.

Plaats het apparaat op een horizontaal oppervlak. Zet het apparaat op matrashoogte of lager om water in de slang en het masker te voorkomen.



Als u wakker bent geworden

1. Zet uw masker af.
2. Druk op de knop “Therapie starten/Stand-by”.



Mijn slaapweergave:

De slaapgegevens van afgelopen nacht zijn te vinden onder MIJN SLAAPWEERG.



Toont gebruikte uren laatste nacht.



Toont het aantal apneus en hypopneus per uur slaap.



Geeft informatie over de maskerafdichting (lekkage). De gele stip op dit pictogram geeft aan dat er informatie te zien is.

- Tik op het symbool voor meer informatie!

Handige app als ondersteuning

MyAir

ResMed biedt de mogelijkheid tot het gebruik van een app, genaamd myAir, voor ondersteuning van uw therapie. Het gebruik van deze app is gratis. MyAir is de manier om zowel uw slaaptherapie als uw vooruitgang zelf te volgen. Om de app te gebruiken dient u deze eerst te installeren op uw mobiele telefoon. Vervolgens koppelt u de AirSense 11 aan de app.


MyAir installeren en in gebruik nemen

Voordat u de AirSense 11 aan uw mobiele telefoon koppelt, moet u ervoor zorgen dat de laatste versie van de app is geïnstalleerd. Als dat niet zo is, downloadt u de app via de App Store® of in de Google Play Store®. Koppel de AirSense 11 aan uw telefoon.

Om de app in te stellen, gaat u naar het menu MEER.

Doorloop vervolgens onderstaande stappen:

1. Zorg dat de AirSense 11 op het stroomnetwerk is aangesloten.
2. Start de myAir-app op uw mobiele telefoon.
3. Tik op Doorgaan.
4. Volg de aanwijzingen op de myAir-app om de bluetooth verbinding te voltooien. AirSense 11 is nu verbonden met de app.
5.  Het bluetooth verbindingssymbool verschijnt op de statusbalk om de verbinding tussen de AirSense 11 en uw mobiele telefoon te bevestigen.
6. Tik op Opslaan.

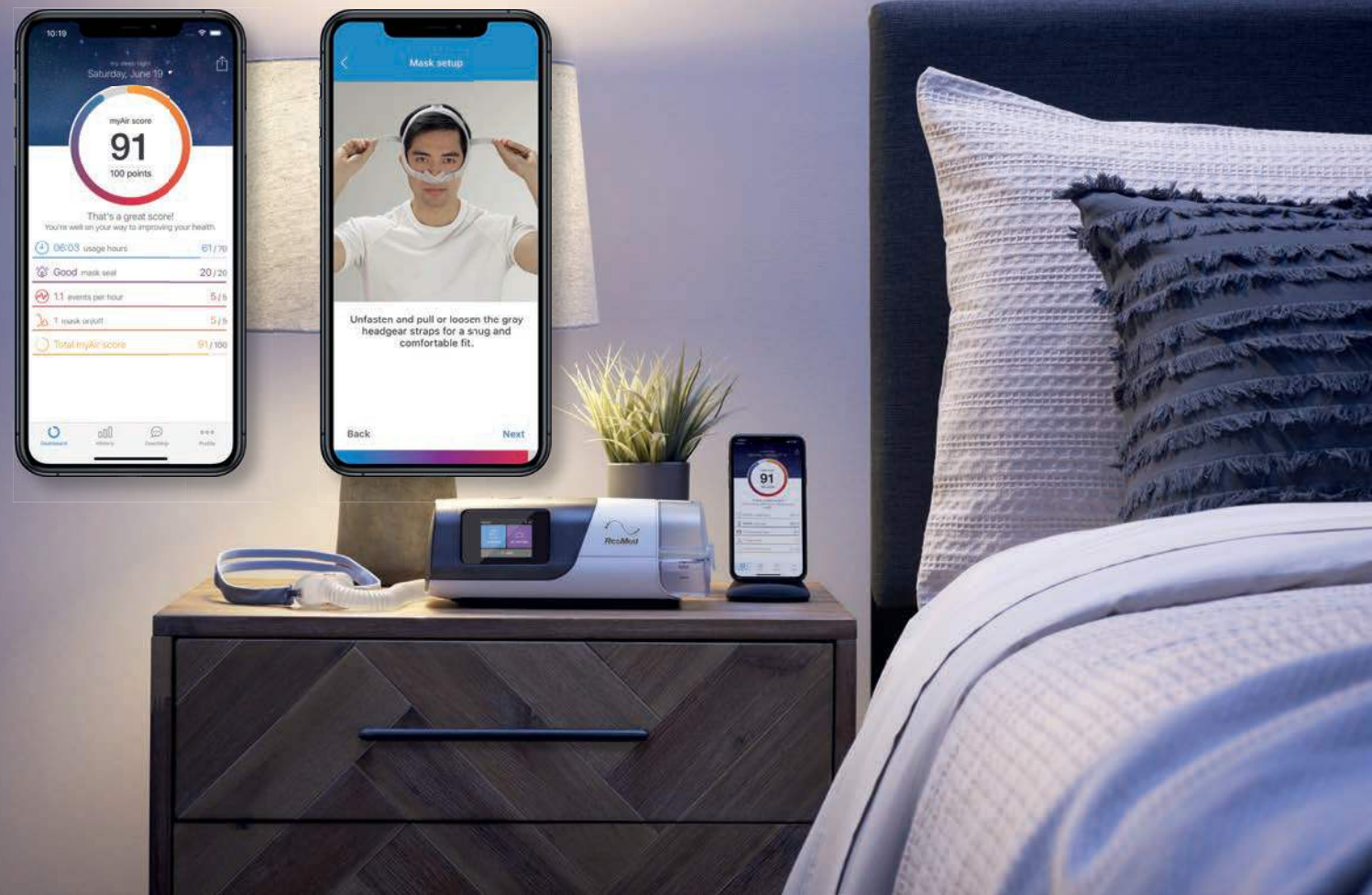

Care Check-in



Wat is Care Check-in?

Care Check-in kunt u gebruiken via de myAir-app of rechtstreeks op het apparaat. Het programma biedt u een makkelijke manier om aan te geven hoe het met u gaat. Wij als uw leverancier en uw arts krijgen automatisch een seintje als het even niet zo goed gaat met uw therapie. Of als u bijvoorbeeld wat extra hulp nodig heeft. Zodra wij dit signaleren, proberen wij u extra te ondersteunen in uw therapie. Wij zijn er voor u!

Care Check-in, hoe werkt het?

Tijdens de eerste 28 dagen van de therapie worden u vragen gesteld over drie onderwerpen.

Slaperigheid	Therapie	Identificatie van problemen
Hoe was uw slaap deze week?	Hoe gaat het met uw therapie?	Wat is het probleem?
(Dag 0/7/14/21/28 en iedere 6 maanden)	(Dag 3/7/14/21/28)	(Wordt alleen gevraagd als er negatief geantwoord is bij het onderwerp therapie)

Hoe ziet Care Check-in er uit?

Als u op “OK” klikt in het scherm “Personaliseren” op uw AirSense 11-apparaat, schakelt u de Care Check-in functie in. U kunt deze functie uitschakelen door op “Nee, bedankt” te klikken als er een “check-in”-scherm verschijnt op uw AirSense 11-apparaat of op de myAir app.

Wanneer u kiest voor “Nee, bedankt” dan geeft u hiermee aan geen gebruik te willen maken van Care Check-in. U krijgt dus geen vragen over de verloop van de therapie. Ook niet in de toekomst.



Persoonlijke Therapie Assistent (PTA)

De Persoonlijke Therapie Assistent is ontwikkeld om u vanaf de start, en tijdens elke stap van de behandeling, te begeleiden. U vindt hier bijvoorbeeld:

Tal van instructievideo's. Hulp om het masker op te zetten. Tips voor probleemoplossing.



U gebruikt de Persoonlijke Therapie Assistent (PTA) via de myAir-app op uw mobiele telefoon.

Problemen en oplossingen

Probleem	Oplossing
Er lekt lucht rond het masker.	Controleer of het masker goed is afgesteld.
Ik krijg een droge of verstopte neus.	Verhoog de stand/temperatuur van de luchtbevochtiger.
Ik krijg waterdruppeltjes op mijn neus, in het masker en in de slang.	Misschien is het vochtigheidsniveau te hoog ingesteld. Verlaag de stand/temperatuur van de luchtbevochtiger. De temperatuur van de slang kan te laag zijn. Verhoog de stand/temperatuur van de luchtbevochtiger.
Mijn mond is heel droog en oncomfortabel.	Verhoog de stand/temperatuur van de luchtbevochtiger. Lost dit het probleem na een paar dagen niet op, neem dan contact met ons op.
Mijn luchtbevochtiger lekt.	Controleer of de luchtbevochtiger goed is aangesloten. Controleer de luchtbevochtiger op zichtbare schade. Controleer of er niet teveel water in zit. Het water mag niet hoger zijn dan het “max” streepje.


Problemen en oplossingen

Probleem		Oplossing
Systeemfout. Er zijn verschillende problemen die mogelijk een systeemfout kunnen veroorzaken.		
Het apparaat heeft misschien in een te warme omgeving gestaan.		Laat het apparaat afkoelen voordat u het opnieuw gebruikt. Haal de stroom even van het apparaat af en sluit hem daarna weer aan om het apparaat op te starten.
Misschien is het luchtfilter verstopt.		Controleer het luchtfilter en vervang het als er sprake is van verstopping. Haal de stroom even van het apparaat af en sluit hem daarna weer aan om het apparaat op te starten.
Misschien is er water in de slang aanwezig.		Verwijder het water uit de slang. Haal de stroom even van het apparaat af en sluit hem daarna weer aan om het apparaat op te starten.

Productspecificaties ResMed AirSense 11

Resmed AirSense 11

Therapie	CPAP, APAP en For Her instelling
Afmeting apparaat (B x L x H)	25,9 x 13,9 x 9,5 cm
Gewicht apparaat	1,13 kilo
Watercapaciteit bevochtiger	380 ml
Druk	4 - 20 cmh2o
Stroomvoorziening	100 - 240 V

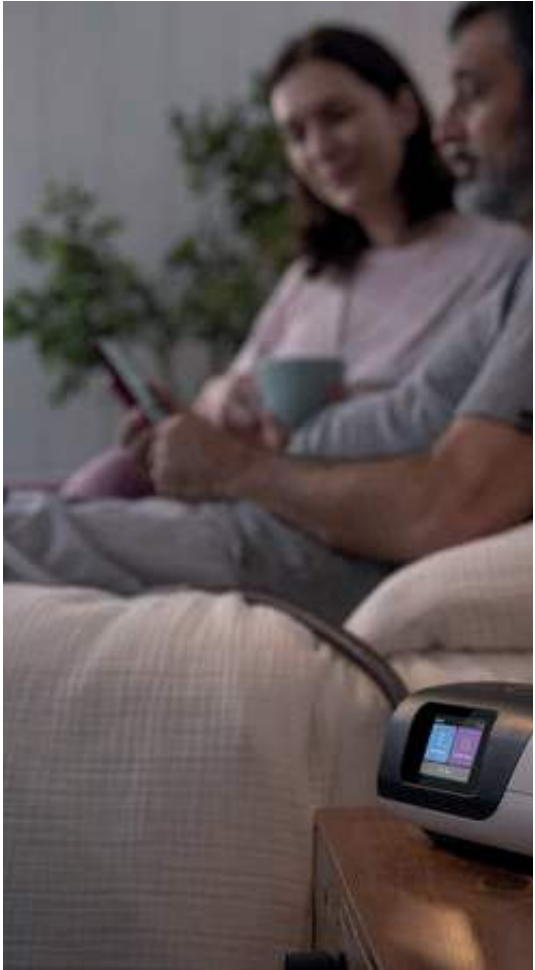

Heeft u nog vragen?

Wij bieden u diverse mogelijkheden om antwoord te krijgen op uw vraag. Zo hebben we op onze website antwoord gegeven op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat u zocht? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan graag voor u klaar!

Contactgegevens

Tel. 0570 - 234 625

Fax 0570 - 858 451

slaapapneu@westfalen.com

westfalenmedical.com

Bestellen van producten

Stuur een e-mail met uw bestelling naar bestellen@westfalen.com.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
08.00 uur tot 18.00 uur

Bereikbaarheid buiten openingstijden

Tel. 0570 – 234 625

(uitsluitend voor spoedgevallen)





Westfalen Medical BV

Rijgsstraat 14
7418 EW Deventer

Tel. 0570 - 234 625
Fax 0570 - 858 451

cpapinfo.nl
cpapinfo@westfalen.com

Westfalen
Medical