



Gebruiksaanwijzing

Cangaroo® Sterilizer Electric Steam 3 in 1

Voor een goede werking van uw sterilisator is het belangrijk dat u deze op de juiste manier gebruikt. Houd u daarom aan de volgende instructies.


Eerste gebruik sterilisator.

Bij het eerste gebruik doet u geen onderdelen in de sterilisator.

- › Meet met de maatbeker (7) 90 ML (gekookt, afgekoeld) water en giet het in het reservoir aan de onderkant van de sterilisator.
- › Plaats de hoofdbehuizing van de sterilisator (3), de mand (2) en de deksel (1) er bovenop.
- › Sluit het netsnoer aan op een stopcontact (geen verlengsnoer) en zet de aan/uit-schakelaar (6) aan.
- › Druk nu de startknop (4) in om het sterilisatieproces te activeren.
- › Zodra het water kookt (100 °C), wordt het omgezet in stoom. Wanneer het water volledig is verdampt, schakelt de sterilisator automatisch uit.
- › Laat de sterilisator ongeveer 3 min. afkoelen. Zet aan/uit-schakelaar (6) uit, en haal de stekker uit het stopcontact.
- › Verwijder de deksel (1), de mand (2) en de hoofdbehuizing van de sterilisator (3) en giet het water af dat niet is verdampt.
- › Maak de onderdelen droog en de sterilisator is klaar voor gebruik.

Alle onderdelen van het apparaat

1. Deksel
2. Mand
3. Hoofdbehuizing van de sterilisator
4. Startknop
5. Basis
6. Aan/Uit knop
7. Maatbeker
8. Tang voor flessen

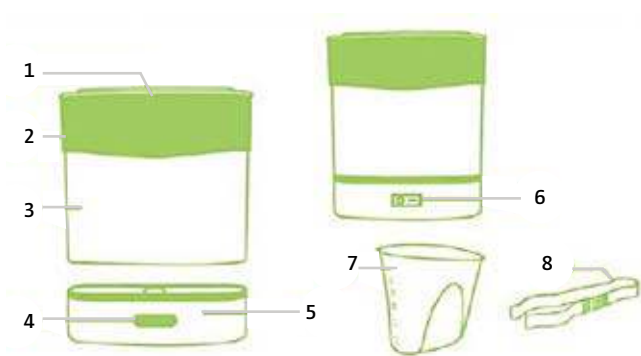

Regulier gebruik sterilisator:

- › Meet met de maatbeker (7) 90 ML (gekookt, afgekoeld) water en giet het in het reservoir aan de onderkant van de sterilisator.
- › Plaats de hoofdbehuizing van de sterilisator (3), de mand (2) en plaats de deksel (1) er bovenop.
- › Haal alle onderdelen van de vernevelaar uit elkaar en plaats deze in de sterilisator. **Let op:** Plaats de onderdelen van de vernevelaar met de opening naar beneden. Hierdoor komt er geen water in te staan. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact (geen verlengsnoer) en zet de aan/uit-schakelaar (6) aan.
- › Druk nu de startknop (4) in om het sterilisatieproces te activeren.
- › Zodra het water kookt (100 °C), wordt het omgezet in stoom. Wanneer het water volledig is verdampt, schakelt de sterilisator automatisch uit.
- › Laat de sterilisator ongeveer 3 min. afkoelen. Zet de aan/uit-schakelaar (6) uit, en haal de stekker uit het stopcontact.
- › Verwijder de deksel (1).
- › Was eerst je handen of gebruik de tang (8) en haal nu de gesteriliseerde onderdelen uit de sterilisator.
- › Schud het overtollige water van alle onderdelen af. Leg ze op een pluisvrije theedoek en laat de onderdelen drogen aan de lucht.
- › Verwijder de mand (2) en de hoofdbehuizing van de sterilisator (3) en giet het water af dat niet is verdampt.
- › Maak de onderdelen droog en de sterilisator is weer klaar voor gebruik.




Schoonmaakinstructies Cangaroo® Sterilizer Electric Steam 3 in 1

Voor een goede werking van uw Sterilisator is het belangrijk dat u het goed schoonhoudt.
Houd u daarom aan de volgende instructies.

Schoonmaak sterilisator (na gebruik) 1x per week

- › Verwijder de deksel (1), de mand (2), de hoofdbehuizing van de sterilisator (3) en giet het water af dat niet is verdampt.
- › Leg de deksel (1), de mand (2), de hoofdbehuizing van de sterilisator (3), de maatbeker (7) en de tang (8) in heet water met 3 druppels mild afwasmiddel.
- › Maak de onderdelen schoon met een spons (geen schuurspons).
- › Spoel alles goed af en schud overtollig water af.
- › Maak de onderdelen droog en de sterilisator is weer klaar voor gebruik.

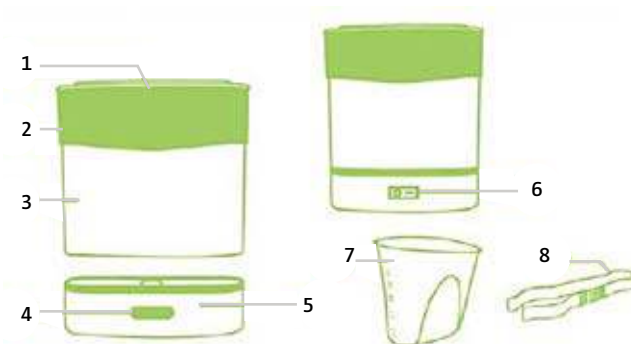

Kalkaanslag in de sterilisator?

Giet 100 ml azijn en 200 ml koud water in het reservoir.
Laat dit zo staan tot de kalkaanslag oplost. Giet de azijn en het water uit de basis (5) en reinig het goed met een vochtige doek, zodat er geen vuil op de bodem achterblijft.
Laat het nu goed drogen aan de lucht.

Alle onderdelen van het apparaat

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. Deksel | 5. Basis |
| 2. Mand | 6. Aan/Uit knop |
| 3. Hoofdbehuizing van de sterilisator | 7. Maatbeker |
| 4. Startknop | 8. Tang voor flessen |

Tips voor het gebruik van de sterilisator

- › Eerst vernevelaar reinigen, voordat je de sterilisator gebruikt.
- › Eerst water erin, dan pas inschakelen.
- › Tijdens de sterilisatie open je de deksel nooit! Als het proces wordt verstoord, dan worden de onderdelen niet steriel!
- › Was eerst je handen (of gebruik de tang) voordat je de gesteriliseerde onderdelen uit de sterilisator haalt.

