



Philips DreamStation 2

Gebruiks- en onderhoudsinstructies

Westfalen
Medical



DreamStation 2 Auto CPAP

De DreamStation 2 Auto CPAP is een compact apparaat met ingebouwde luchtbevochtiger dat wordt gebruikt voor de behandeling van slaapapneu. U ontvangt van ons bij het apparaat indien gewenst een verwarmde slang.



Eenvoudige bediening

Het apparaat is voorzien van een gebruiksvriendelijk kleuren touchscreen display met een eenvoudige bediening.



Licht van gewicht

De DreamStation 2 is klein en licht uitgevoerd, waardoor het apparaat eenvoudig mee te nemen is tijdens reizen of verblijf buiten de deur.



Stil in gebruik


Het apparaat is ontworpen voor een stille werking, zodat zowel gebruiker als partner zo min mogelijk hinder ondervinden tijdens de slaap.

Wanneer u de instructies leest en het apparaat met zorg behandelt, zult u veel plezier hebben van de Philips DreamStation 2.





1. Luchtuitlaat poort
2. Penaansluiting verwarmde slang
3. Knop Therapie aan/uit
4. Touchscreen display
5. Luchtbevochtiger
6. Luchtinlaat
7. Toegang voor filter
8. Toegang tot SD-kaart
9. Luchtinlaat naar de luchtbevochtiger
10. Afdichting luchtinlaat/-uitlaat
luchtbevochtiger
11. Verwarmingsplaat
12. Voedingsingang

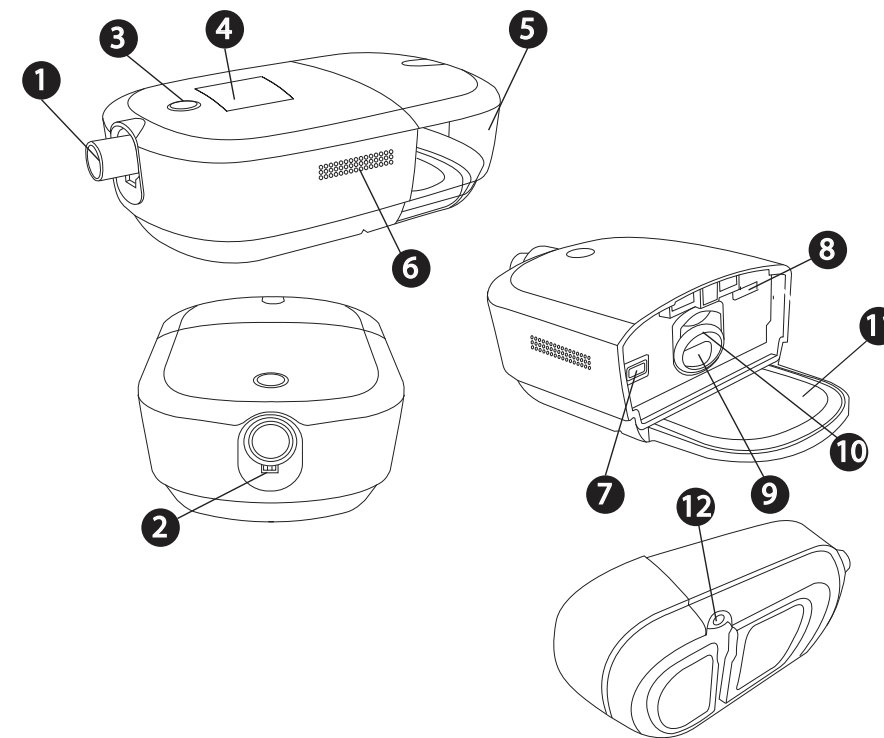

aan ● **Apparaat aanzetten**
Druk op de therapieknop aan de bovenzijde van het apparaat. De ring rond de knop gaat blauw branden.

aan ○ **Apparaat uitzetten**
Druk op de therapieknop aan de bovenzijde van het apparaat. De ring rond de knop gaat wit branden.

! **Aandachtspunt**
Laat de verwarmingsplaat en het water ongeveer 15 minuten afkoelen voordat u de luchtbevochtiger verwijdert.



Het touchscreen display
Op het display kunt u de apparaatinstellingen aanpassen en informatie over uw therapie bekijken.

Terwijl het apparaat therapie toedient, wordt de drukinstelling weergegeven.

U kunt ook **de luchtbevochtiging, de temperatuur van de verwarmde slang (indien u deze gebruikt) en de RAMP PLUS-instellingen** weergegeven en aanpassen.



Philips biedt de mogelijkheid tot het gebruik van een app, genaamd Dreammapper, voor ondersteuning van uw therapie.

Het gebruik van deze app is gratis. Dreammapper is de manier om zowel uw slaaptherapie als uw vooruitgang zelf te volgen. Om de app te gebruiken dient u deze eerst te installeren op uw computer of mobiele telefoon. Vervolgens koppelt u de DreamStation 2 aan de app.

Dreammapper installeren en in gebruik nemen

1. Maak een account
Houd uw DreamStation 2 serienummer bij de hand.

2. Download de app via de computer of uw mobiele apparaat.

Via de computer: ga naar mydreammapper.com

Via uw mobiele apparaat: download de app via de App Store of Google Play store.

3. Maak verbinding met uw DreamStation 2

Gebruik de Bluetooth-module van uw DreamStation 2 om een draadloze verbinding te maken via uw computer of via de Bluetooth-instellingen van uw mobiele apparaat.



Ontdek ons uitgebreide assortiment comfortartikelen!

In onze webshop vindt u onder andere handige tassen, comfortabele kinbanden en adapters. Heeft u behoefte aan een reservemasker of extra slang? Ook deze zijn eenvoudig bij ons te bestellen.

Let op: comfortartikelen worden niet vergoed door de zorgverzekeraar, maar zijn direct verkrijgbaar in onze webshop.

Er kunnen pop-up berichten op uw scherm verschijnen om u te waarschuwen voor een vereiste actie, statusupdate van het apparaat of een herinnering.

Probleem	Oplossing
Er lekt lucht rond het masker.	Controleer of het masker goed is afgesteld.
Ik krijg een droge of verstopte neus.	Verhoog de stand van de luchtbevochtiger.
Ik krijg waterdruppeltjes op mijn neus, in het masker en in de slang.	1. Misschien is het vochtigheidsniveau te hoog ingesteld. - Verlaag de stand van de luchtbevochtiger. 2. De temperatuur van de slang kan te laag zijn. - Verhoog de stand van de slangtemperatuur.
Mijn mond is heel droog en oncomfortabel.	Verhoog de stand van de luchtbevochtiger. Lost dit het probleem na een paar dagen niet op, neem dan contact met ons op.

Probleem	Oplossing
Mijn luchtbevochtiger lekt.	Controleer of de luchtbevochtiger goed is aangesloten. Controleer de luchtbevochtiger op zichtbare schade. Controleer of er niet teveel water in zit. Het water mag niet hoger zijn dan het “max” streepje.
Het apparaat heeft misschien in een te warme omgeving gestaan.	Laat het apparaat afkoelen voordat u het opnieuw gebruikt. Haal de stroom even van het apparaat af en sluit hem daarna weer aan om het apparaat op te starten.
Misschien is het luchtfilter verstopt.	Controleer het luchtfilter, maak het goed schoon en plaats het filter terug. Haal de stroom even van het apparaat af en sluit hem daarna weer aan om het apparaat op te starten.
Misschien is er water in de slang aanwezig.	Verwijder het water uit de slang. Haal de stroom even van het apparaat af en sluit hem daarna weer aan om het apparaat op te starten.

Therapie	CPAP en APAP
Afmeting apparaat (B x L x H)	15,8 x 27,3 x 8,4 cm
Gewicht apparaat	780 gram
Druk	4-20 cmH ₂ O
Stroomvoorziening	100 - 240 V



Heeft u nog vragen?

Wij bieden u diverse mogelijkheden om antwoord te krijgen op uw vraag. Zo hebben we op onze website antwoord gegeven op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat u zocht? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan graag voor u klaar!

Contactgegevens

Tel. 0570 - 234 625
slaapapneu@westfalen.com
westfalenmedical.com

Bestellen van producten

Stuur een e-mail met uw bestelling naar slaapapneu@westfalen.com.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
08.00 uur tot 18.00 uur

Bereikbaarheid buiten openingstijden

Tel. 0570 – 234 625

(uitsluitend voor spoedgevallen)





Westfalen Medical BV

Rijgstraat 14
7418 EW Deventer

Tel. 0570 - 234 625
slaapapneu@westfalen.com
westfalenmedical.com

Westfalen
Medical